

PerfectDry Lux

WIDEX
HÖRGERÄTE


Trocknungssystem:

PerfectDry Lux trocknet sämtliche Hörgeräte-Typen innerhalb von nur 45 Minuten. Dank der automatischen Temperaturregulierung des Gerätes wird die Temperatur von 40 °C nicht überstiegen. Die vollständige Trocknung der Hörgeräte wird gewährleistet, ohne dass die elektrischen Bestandteile beschädigt werden.



360°-UV-C-Lampe:

Die UV-C-Lampe mit kurzer Wellenlänge sorgt durch deren ringförmige Anordnung in 360° dafür, dass die gesamte Oberfläche des Hörgeräts erreicht wird.

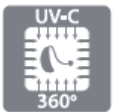

Start-Button mit LED-Beleuchtung:

Die Trocknung der Hörsysteme dauert nur 45 Minuten.



Blinkendes blaues Licht

Der Trocknungsvorgang läuft.



Licht aus

Der Trocknungsvorgang ist beendet.



Blaues Licht

Stand-by-Modus kurz nach dem Schließen der Abdeckung. Danach erlischt das Licht.