



C-tune II


DÉMARRAGE SESSION

Introduction

Lorsque vous ouvrez C-tune II, le programme démarre en affichant la fenêtre générale DÉMARRAGE SESSION. Il s'agit de la page d'accueil du programme C-tune.

Détecter les aides auditives

- Première visite : Lorsque vous sélectionnez le bouton *Connecter*, la boîte de dialogue Détecter aides auditives s'ouvre. Lorsque les aides auditives sont connectées, vous êtes dirigé vers l'affichage PROGRAMMATION.

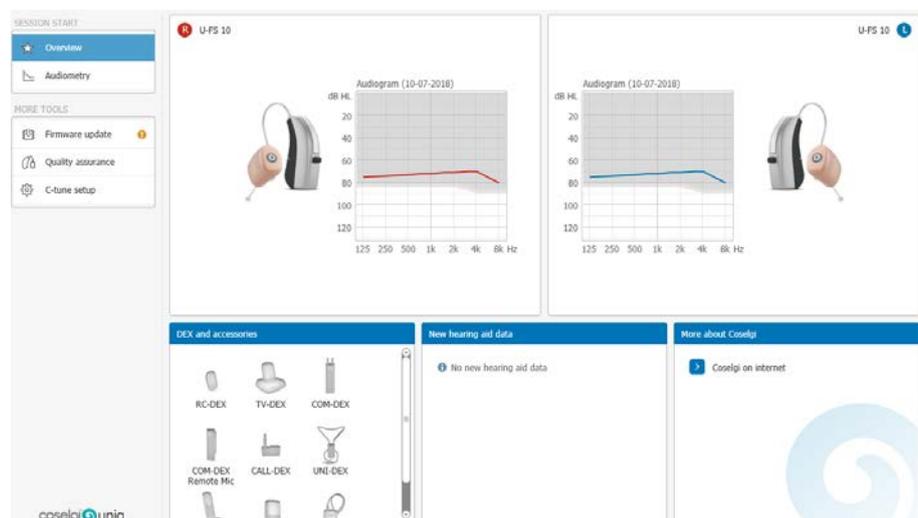

- Visite de suivi : Lorsque vous sélectionnez le bouton *Connecter*, la boîte de dialogue Détecter aides auditives s'ouvre. Lorsque les aides auditives sont connectées, vous êtes dirigé vers l'affichage DÉMARRAGE SESSION. L'affichage DÉMARRAGE SESSION est alors actualisé avec les informations concernant les aides auditives du patient.

Informations essentielles sur DÉMARRAGE SESSION

La fenêtre DÉMARRAGE SESSION vous donne un aperçu des interfaces utilisées pour la programmation et vous donne des informations essentielles sur le patient. La fenêtre DÉMARRAGE SESSION a plusieurs objectifs :

- Offre un aperçu général
- Affiche ce qu'il s'est passé depuis la dernière programmation/visite du patient
- Donne accès aux fonctions appropriées avant que vous n'activiez Connecter
- Donne plus de souplesse à l'audioprothésiste

Les volets

Sous la partie de l'audiogramme, vous trouverez une rangée de volets. Le volet *DEX et accessoires* est toujours présent. Selon si les aides auditives sont connectées ou non, le volet *Points de départ suggérés* ou *Nouvelles données sur les aides auditives* est également affiché.

- **DEX et accessoires**
Dans ce volet, vous pouvez voir quels sont les appareils DEX disponibles si vous êtes connecté aux aides auditives. Veuillez noter que vous ne pouvez pas appairer d'appareil DEX disponible en le sélectionnant dans ce volet. Cependant, vous pouvez cliquer sur une icône DEX pour ouvrir la fenêtre Appairage DEX. Si une petite flèche verte apparaît près de l'appareil DEX, cet appareil est appairé aux aides auditives.
- **Points de départ suggérés**
Ce volet s'affichera si vous avez choisi un nouveau patient et s'il s'agit de sa première visite. Cela est également le cas pour une visite de suivi, mais le contenu du volet pourra être modifié. Le volet vous permet de vous connecter aux aides auditives ou d'aller à la fenêtre SÉLECTION.
- **Nouvelles données sur les aides auditives**
Ce volet indique les données qui ont été modifiées depuis la dernière connexion des aides auditives à C-tune. Cela vous donne un bref aperçu de ce qu'il s'est passé depuis la dernière session. Si Niveau d'expérience automatique a été modifiée, vous pouvez voir le niveau en utilisant l'icône en dessous du texte de ce volet (à moins que la fonctionnalité ait atteint le niveau quatre).
- **Pour en savoir plus sur Coselgi**
Ce volet affiche un lien vers plus d'informations sur Coselgi. Le lien vous amène à la page d'accueil de Coselgi sur laquelle vous pouvez en apprendre davantage sur les produits avec lesquels Coselgi travaille.

Vous pouvez accéder à certaines fonctionnalités en cliquant sur le texte. Cela vous conduit directement à la fenêtre contenant la fonctionnalité sélectionnée.

Outils de la rubrique DÉMARRAGE SESSION

Depuis la fenêtre DÉMARRAGE SESSION, vous avez accès à plusieurs outils :

- La **mise à jour du firmware** vous permet d'installer toute mise à jour disponible dans vos aides auditives ou appareils d'aide à l'écoute. Veuillez noter que cette fonctionnalité n'est pas disponible pour toutes les aides auditives.

- **Transférer les réglages** vous permet de remplacer l'aide auditive d'une paire. Utilisez la fonctionnalité si une seule aide auditive de la stéréo est disponible et que vous avez besoin de la remplacer sans perdre l'appairage.
- **Assurance qualité** vous permet de vérifier le matériel de l'aide auditive et d'effectuer des tests avec l'aide auditive dans une boîte de test.
- La **Confidentialité Client** vous donne accès au Consentement de Recherche et Développement et à l'Avis de Confidentialité. Dans cette fenêtre, vous pouvez consentir, ou retirer le consentement, au nom de votre client.
- **Configuration de C-tune** vous permet de modifier la configuration générale du programme C-tune II. Par exemple, vous pouvez changer la langue ou changer les affichages graphiques par défaut.

Ce document est fourni sous forme électronique. Vous pouvez faire la demande d'une version papier gratuitement sur <http://widex.pro/gps-startup-guide>. Délai de livraison estimé à 7 jours ouvrés. Le document est désormais disponible sur <http://widex.pro/gps-startup-guide>.

© Coselgi. Tous droits réservés

Version du document : 5.0. Publié : 2022-05