



C-tune II

SELEZIONE

Introduzione

Questa Guida Rapida spiega come lavorare nell'area SELEZIONE di C-tune II.




Alcuni apparecchi acustici possono arrivare a produrre un livello di pressione sonora che supera i 132 dB SPL. È importante fare molta attenzione quando si lavora con questo tipo di prodotti, in quanto la pressione sonora che sono in grado di generare potrebbe provocare danni permanenti all'udito. C-tune II vi avverte, quando si selezionano apparecchi acustici ad alta potenza, mostrando una finestra con un messaggio di allerta.

Selezione apparecchio acustico

Al centro della schermata è possibile selezionare la serie specifica, il modello dell'apparecchio acustico prescelto ecc. mediante l'elenco a discesa e le rispettive caselle di controllo - le caselle sono suddivise in quattro colonne.

Dal centro della schermata è possibile selezionare le serie di apparecchi

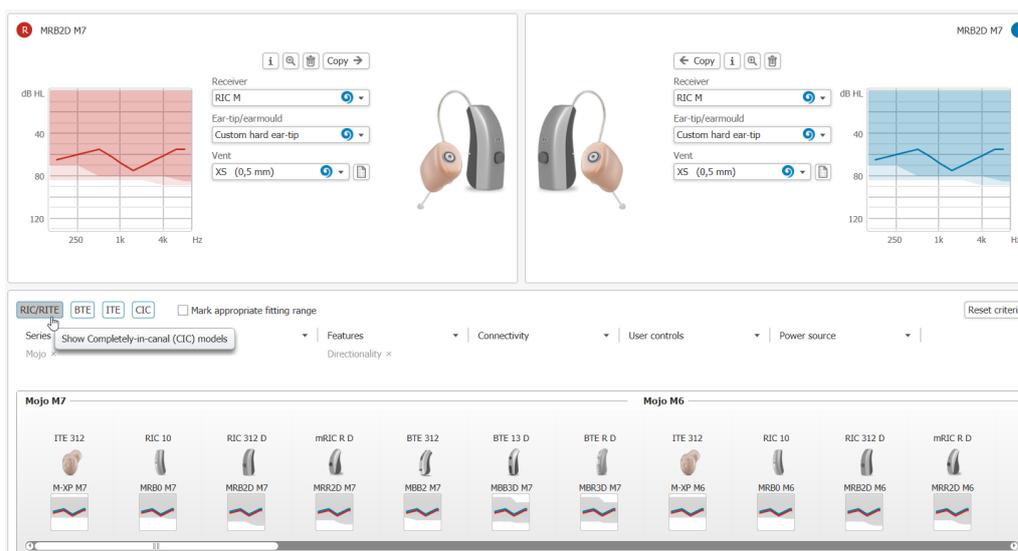

acustici specifiche, i modelli, ecc. utilizzando gli elenchi a discesa e i relativi pulsanti. Servirsi dei pulsanti per visualizzare gli apparecchi acustici RIC/RITE, ITE e CIC e tramite i sei elenchi a discesa filtrare gli apparecchi acustici per visualizzare solo i modelli desiderati.


Il pulsante *Reset criteri* consente di tornare all'impostazione predefinita che visualizza tutti gli apparecchi acustici nella parte inferiore della schermata.

Selezionando la casella *Campo Applicativo Appropriato*, vedrete apparire un segno di spunta sotto quegli apparecchi acustici il cui campo applicativo soddisfa i requisiti dell'audiogramma del vostro cliente.

Nella parte inferiore della schermata compaiono tutti gli apparecchi acustici disponibili, in base alle scelte effettuate poco prima nell'area centrale della schermata. Potete anche personalizzare la visualizzazione, scegliendo gli apparecchi acustici da voi prescelti. Tramite la barra di scorrimento orizzontale, potete scorrere e vedere tutti gli apparecchi acustici disponibili.

Informazioni sugli apparecchi acustici

Con il puntatore del mouse potete scegliere una serie di apparecchi acustici. Quando si posiziona il puntatore del mouse su un apparecchio acustico, selezionare l'icona rossa R per l'orecchio destro, l'icona blu L per l'orecchio sinistro o l'icona rossa e blu, posizionata tra i due. Una volta scelta la coppia di apparecchi acustici da applicare, essi vengono visualizzati nella parte superiore dell'area di lavoro. Ogni pannello comprende i seguenti elementi:

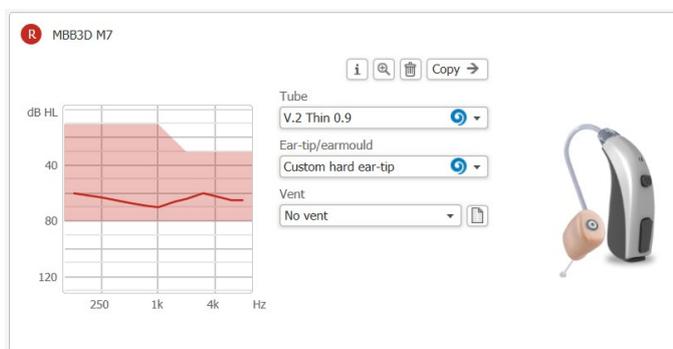

- Nome del modello dell'apparecchio acustico vicino all'icona rossa (R) per l'apparecchio acustico destro, oppure di colore blu (L) per quello sinistro.
- Audiogramma
- Campo applicativo
- Elenco a discesa per la selezione degli Auricolari (in base al modello di apparecchio acustico prescelto)
- Pulsante Informazioni (relative all'apparecchio acustico prescelto)
- Pulsante Zoom
- Pulsante Elimina
- Pulsante Copia Auricolare
- Illustrazione dell'apparecchio acustico prescelto (quando si sceglie la tipologia di l'Auricolare, l'illustrazione mostra l'apparecchio acustico insieme alla soluzione prescelta).
- Pulsante per accedere alla tabella con i dati di conversione della Ventilazione, per aiutarvi a scegliere la misura di ventilazione corretta per l'auricolare o la chiocciola del vostro paziente.

Questo documento viene fornito in formato elettronico. La versione cartacea può essere richiesta gratuitamente a <http://widex.pro/gps-startup-guide> e la si può ricevere via posta in circa 7 giorni lavorativi. Il documento è disponibile anche tramite questo link: <http://widex.pro/gps-startup-guide>

© Coselgi. Tutti i diritti riservati.

Versione documento: 5.0 Data pubblicazione: 2023-03