




## COMPASS GPS

# DEX 和配件

### 簡介

這是一個快速指南，通知您有關 DEX 和配件以及匹配和註冊程序。然後才能進行 DEX 和助聽器的匹配程序。

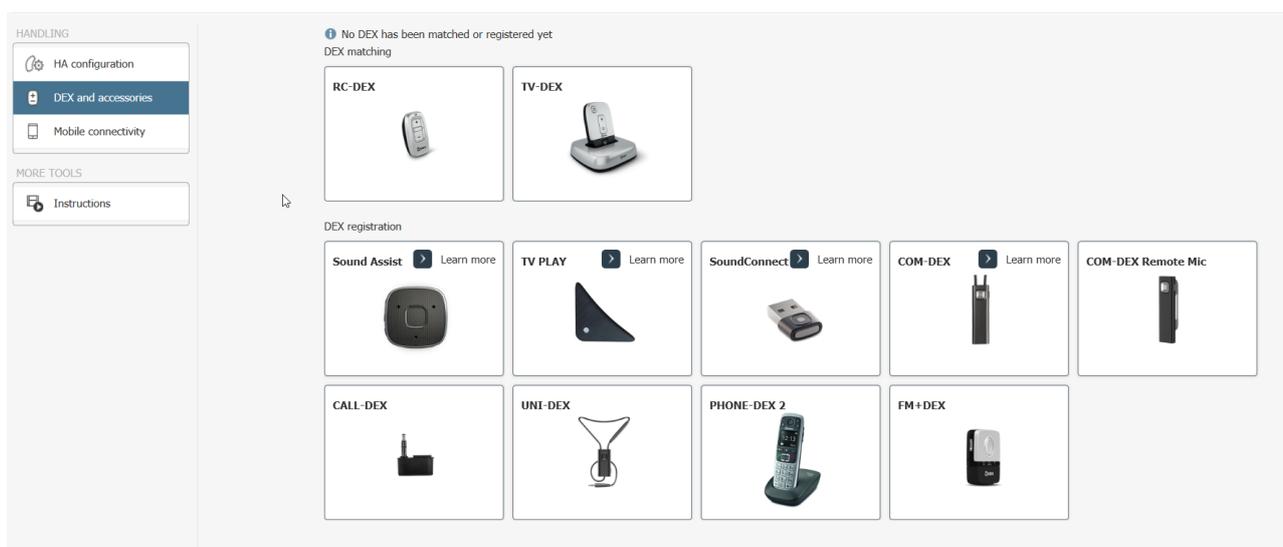

由左導覽列，點選 DEX 和配件。在 DEX 和配件視窗中，您可以看到任何已經匹配或註冊的 DEX 設備，您可以開始匹配或註冊新的 DEX 設備。

如果您需要特定 DEX 類型的匹配過程說明，可以單擊所需的 DEX 類型，然後在匹配對話框中單擊 DEX 的說明圖標。它會開啟另外的視窗說明如何準備和執行匹配。

## 匹配程序


無論那一種 DEX，它的匹配程序都一樣。如下：

1. 確認助聽器已連接到 Compass，且已調整好。
2. 由導覽列，點選 DEX 和配件。
3. 選擇您想要匹配的 DEX 類型。 匹配對話框打開。
4. 選擇開始匹配按鈕，開啟匹配視窗，並進行匹配。
5. 將 DEX 對著助聽器，同時壓下它的 2 個音量鍵，持續約 5 秒鐘。

Compass 匹配助聽器和 DEX，在匹配視窗上顯示 DEX 機型，序號和匹配狀態。

假如匹配未成功，視窗除了顯示結果，並建議解決辦法。

6. 點按”確認”按鈕，儲存匹配，回到 DEX 和配件視窗。 DEX 視窗現在顯示一個勾選標記，表示匹配已完成。

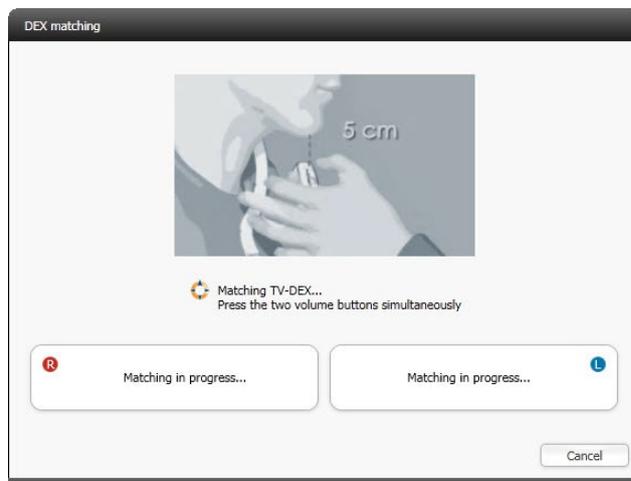

## 移除匹配

點按 DEX 旁的”移除匹配”按鈕，選擇所需的 DEX 類型，然後選擇刪除匹配按鈕。 開啟一個對話框，詢問您是否確定要刪除匹配。選擇”是”，刪除並返回到 DEX 和配件視窗。

## 登記 DEX

有些 DEX 和配件並不需要匹配助聽器，但您仍可將它的序號登記到 Compass/NOAH 資料庫及助聽器內。

要註冊 DEX 或配件，請執行以下操作：

1. 在 DEX 和配件窗口中，選擇要註冊的類型。 開啟註冊對話框。
2. 在文字欄位中寫入設備的序列號，然後點按註冊。 序號便儲存到 Compass/NOAH 資料庫及助聽器內。

如果您想再次刪除註冊，您可以打開註冊對話框，並選擇刪除註冊按鈕。

# 快捷導引

## 聲音助理 (Sound Assist)

針對 MOMENT 藍牙助聽器，可註冊聲音助理 (Sound Assist)，您也可為本 DEX 聲音助理的訊息選擇 SmartSpeak 的語言。使用 SmartSpeak 設定按鈕選擇 SmartSpeak 語言和性別。

請注意，您不能將 Sound Assist 和 SoundConnect 同時與同一個助聽器配對。要在兩個 DEX 裝置間切換，您必須再次配對所想要的裝置。

這種啟動指南是以電子形式提供，若要紙本，也可以免費向<http://wiDEX.pro/gps-startup-guide> 索取，預計交付時間7 天。啟動指南也可在<http://wiDEX.pro/gps-startup-guide> 瀏覽。

若要更詳細的資訊，請開啟 *Compass* 程式的導覽列中的小幫手，或按鍵盤上的 F1 按鈕。

© Widex. 版權所有

Document version: 7.0. Issued: 2023-08