




COMPASS GPS

CROS/BICROS

Introducción

Esta guía rápida contiene información sobre la función CROS/BiCROS. Seleccione CROS/BiCROS en la barra de navegación situada a la izquierda de la ventana MANEJO.

En una configuración CROS, COMPASS genera automáticamente una adaptación del audífono basada en el audiograma.

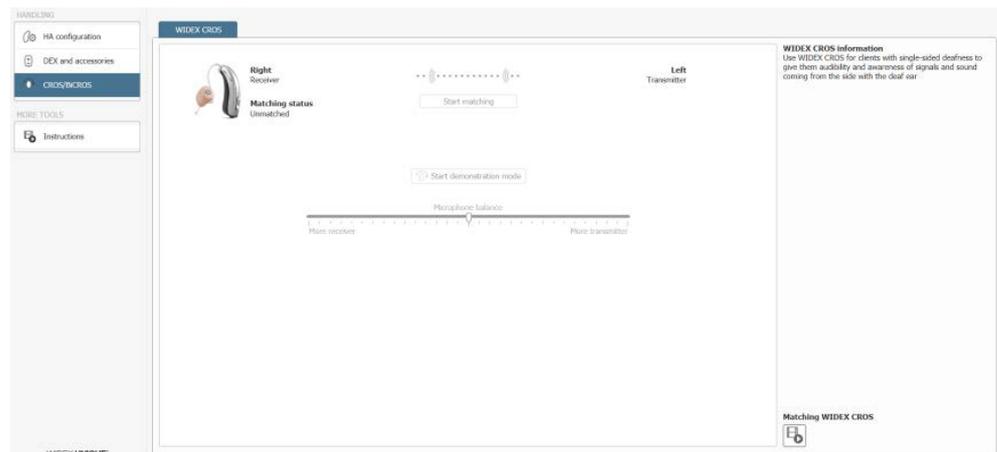

En una configuración BiCROS, debe hacer una adaptación monoaural del audífono receptor. Mida el Sensograma y el test de feedback y haga los reajustes necesarios.

La ventana CROS/BiCROS

En esta ventana puede ver los alineamientos CROS o BiCROS y puede iniciar uno nuevo. Durante el procedimiento puede cambiar los ajustes de la configuración CROS/BiCROS.

El procedimiento de alineamiento

El procedimiento de alineamiento es parecido al de las unidades DEX. Tenga en cuenta que no puede hacer un alineamiento CROS/BiCROS en una adaptación binaural. Siga los pasos siguientes:

1. Seleccione el botón Iniciar alineamiento. Al lado de este botón puede ver el estado de alineamiento y más información importante.
2. Seleccione CROS o BiCROS en la casilla de diálogo Seleccionar tipo. Puede ver información sobre el tipo seleccionado en su pantalla.
3. En el lado derecho, seleccione el modo del micrófono. Puede elegir entre Localizador y Localizador omni. Puede ver información sobre las opciones en su pantalla.
4. Seleccione si desea *Activar* o *Desactivar* la función *Autoactivar transmisión*. Si ha activado la función *Autoactivar transmisión*, la transmisión se autoactiva cuando el usuario enciende el transmisor cerrando el compartimento de pila.
5. Seleccione el botón Siguiente para iniciar el alineamiento. Asegúrese de mantener el audífono y el transmisor dentro del radio de acción de la interfaz de programación. Se realiza el alineamiento.
6. Seleccione Aceptar en la casilla de diálogo Se ha finalizado el alineamiento.

Demostración de sonido CROS/BiCROS

Recomendamos que haga una demostración de la configuración CROS/BiCROS una vez realizado el alineamiento. Así se puede asegurar de que la configuración funciona bien y que el cliente recibe el mejor sonido posible.

1. Asegúrese de que el transmisor y el receptor están bien colocados en los oídos de su cliente.
2. Seleccione el botón Iniciar modo de demostración situado en el centro de la ventana. Aparece una casilla de diálogo. Esta casilla le ofrece una serie de consejos sobre cómo evaluar el sonido. Vea la ilustración a la derecha.
3. Active el transmisor pulsando el selector de programa. El receptor emite un sonido cuando se activa la transmisión.
4. Permita que el usuario evalúe el sonido. Si es necesario puede hacer ajustes en la Desviación del sonido transmitido (en una configuración CROS) o en el Equilibrio del micrófono (BiCROS). Solo puede ajustar el sonido relacionado con la configuración concreta. Pase a la sección Reajustes si necesita hacer ajustes generales del sonido.
5. Desactive el transmisor pulsando de nuevo el selector de programa.
6. Seleccione el botón Parar modo de demostración para volver a la ventana CROS/BiCROS. El transmisor solo está activo durante el modo de demostración.



Para más información utilice el sistema de Ayuda situado en la barra de navegación superior o pulse la tecla F1 en el teclado.

Este documento se suministra en versión electrónica. Puede solicitar una versión impresa sin costo adicional en <http://widex.pro/gps-startup-guide>. El plazo de entrega estimado es de 7 jornadas laborales. Este documento también está a su disposición en <http://widex.pro/gps-startup-guide>.

© Widex. Reservados todos los derechos

Versión de documento: 4.0. Fecha de emisión: 2020-11