

WIDEX MAGNIFY™ 充電式 BTE R D




WIDEX BTE R D は WIDEX MAGNIFY™ シリーズの製品です。WIDEX MAGNIFY™ プラットフォームを基に、TruAcoustics™ により、より優れた聞こえをお届けするこの補聴器では、すべてが新しいチップに統合されています。接続性も改善されました。

TruAcoustics™ により、BTE R D のフィッティングはかつてないほど容易になり、よりパワフルなパーソナライズされた聞こえをお届けします。

BTE R D は内蔵のリチウムイオン電池で動作します。また、専用充電器を使用してワイヤレスで充電できます。アプリサポートは Android および iOS への Bluetooth 直接接続によって行われ、TV PLAY、SOUND ASSIST にも接続できます。

- ワイヤレスモバイルとの直接接続 (2.4 GHz)
- DEX 補助援助機器との互換性
- 優先コントロール、プログラムボタンおよびテレコイル
- リチウムイオン充電式電池使用
- LED 内蔵優先コントロールボタン
- TV PLAY、SOUND ASSIST に対応
- 保護等級 IP68
- 軽度から高度および重度の難聴に対応

推奨されるフィッティングレンジ

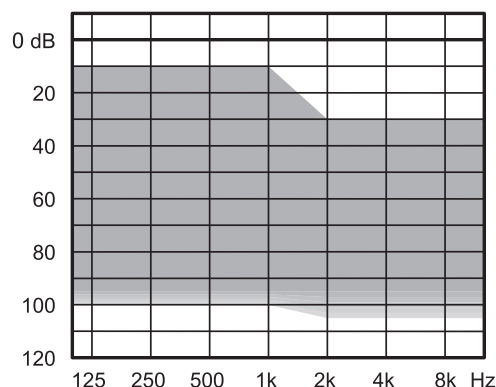

標準技術

- WIDEX MAGNIFY™ プラットフォーム採用、パーソナルゲイン インテグレーター
- 聞こえとフィッティングを向上させる TruAcoustics™

主な機能	100	50
処理・調整チャンネル数	6	4
パーソナルゲインインテグレーターによる TruAcoustics™	・	・

接続性

2.4 GHz のコントロール (Android および iOS)	・	・
2.4 GHz の音信号の伝送 (Android*および iOS)	・	・
WidexLink と DEX 補助援助機器**	・	・
テレコイル	・	・

iOS および Android 向けアプリ

MAGNIFY アプリ	・	・
TONELINK アプリ	・	・
COM-DEX アプリ (iOS のみ)	・	・


機能

順応マネージャー	・	・
プログラム	3	3
ロケーター	6 チャンネル	4 チャンネル
LED 内蔵優先コントロール	・	・
プログラム可能なプッシュボタン***	・	・
ソフトレベルノイズリダクション	・	・
ノイズリダクション	NR	弱
ZEN	・	・
オーディビリティエクステンダー	・	・


*ASHA 対応の Android 端末のみ。 **以下の DEX 聴取援助機器も含まれます：TV-DEX、COM-DEX、RC-DEX、FM+ DEX、TV-PLAY、SOUND ASSIST。 ***プログラム可能:プログラムボタン、音量調整ボタンとして設定可能。

WIDEX MAGNIFY と直接伝送に対応する機器の詳細についてはこちらをご覧ください：global.widex.com/compatibility


最大音響利得 (入力音圧 50dB SPL)

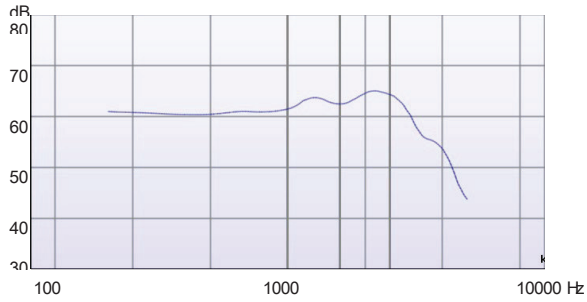


最大出力音圧 (入力音圧 90dB SPL)

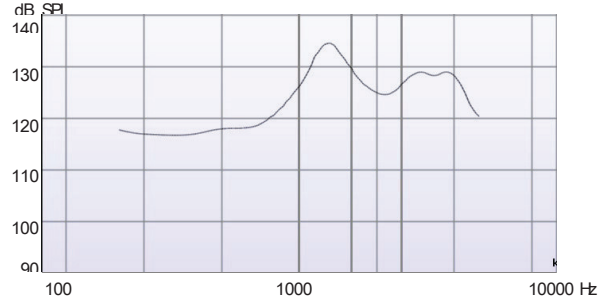

規準周波数特性 (入力音圧 60dB SPL)

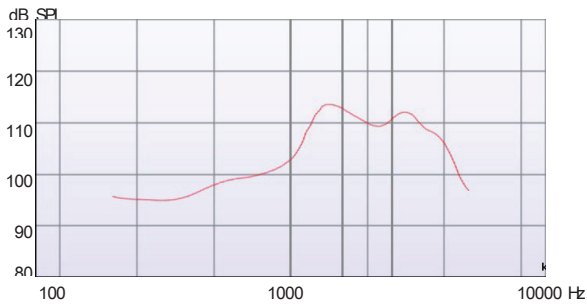

誘導コイル入力 特性 (磁界の強さ 31.6 m A/m)

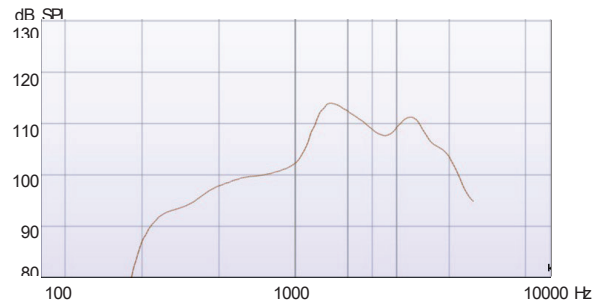

JIS C 5512:2015 (2cm²カプラで測定) による公称値

		MBR3D	
電池の種類		リチウムイオン電池	
90dB入力最大出力音圧レベル	HFA	127	dB SPL
	ピーク	136	dB SPL
最大音響利得	HFA	62	dB
	ピーク	66	dB
規準利得	HFA	48	dB
周波数範囲		100-5750	Hz
等価入力雑音レベル		23	dB SPL
電池の電流		1.4	mA
全高調波ひずみ	500Hz	5	%
	800Hz	4	%
	1600Hz	3	%
試験用ループに対する等価感度		107	dB
誘導コイル入力の最大感度		91	dB

製造業者の名称: ワイデックス株式会社

105-0013 東京都港区浜松町2-6-2 浜松町262ビル6F

TEL: 0120-332-604