

WIDEX MOMENT™ MINI RIC (充電式)、V.2 RIC P-レシーバー



WIDEX mRIC R D は WIDEX MAGNIFY™ シリーズの製品です。WIDEX MAGNIFY™ プラットフォームを基に、TruAcoustics™ により、より優れた聞こえをお届けするこの補聴器では、すべてが新しいチップに統合されています。接続性も改善されました。


TruAcoustics™ により、mRIC のフィッティングはかつてないほど容易になり、よりパワフルなパーソナライズされた聞こえをお届けします。

この mRIC は内蔵のリチウムイオン電池によって作動し、専用充電器によりワイヤレスで充電できます。

WIDEX は、まったく新しいデザインの、ワントーンカラーの補聴器フォームファクターを提供します。アプリサポートは Android および iOS への Bluetooth 直接接続によって行われ、TV PLAY、SOUND ASSIST にも接続できます。

- ワイヤレスモバイルとの直接接続 (2.4 GHz)
- DEX 補助援助機器との互換性
- V.2 Easyware P-レシーバー使用
- 小型でパワフルなレシーバー、より幅広いフィッティングレンジに対応
- リチウムイオン充電式電池使用
- TV PLAY、SOUND ASSIST に対応
- 中度からきわめて高度の難聴に対応
- 保護等級 IP68

推奨されるフィッティングレンジ

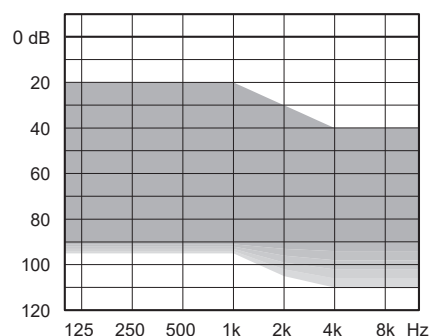

標準技術

- WIDEX MAGNIFY™ プラットフォーム採用、パーソナルゲインインテグレーター
- 聞こえとフィッティングを向上させる TruAcoustics™

主な機能	100	50
処理・調整チャンネル数	6	4
パーソナルゲインインテグレーターによる TruAcoustics™	・	・

接続性

2.4 GHz のコントロール (Android および iOS)	・	・
2.4 GHz の音信号の伝送 (Android*および iOS)	・	・
WidexLink と DEX 補助援助機器**	・	・

iOS および Android 向けアプリ

MAGNIFY アプリ	・	・
TONELINK アプリ	・	・
COM-DEX アプリ (iOS のみ)	・	・

機能

順応マネージャー	・	・
プログラム	3	3
ロケーター	6 チャンネル	4 チャンネル
優先コントロール	・	・
プログラム可能なプッシュボタン***	・	・
ソフトレベルノイズリダクション	・	・
ノイズリダクション	NR	弱
ZEN	・	・
オーディビリティエクステンダー	・	・

*ASHA 対応の Android 端末のみ。 **以下の DEX 聴取援助機器も含まれます：TV-DEX、COM-DEX、RC-DEX、FM+ DEX、TV-PLAY、SOUND ASSIST。 ***プログラム可能：プログラムボタンおよびオン/オフスイッチとして、音声調整ボタンおよびオン/オフスイッチとして、専用のオン/オフスイッチとして使用可能。


WIDEX MAGNIFY と直接伝送に対応する機器の詳細についてはこちらをご覧ください： global.widex.com/compatibility

WIDEX


SOUND LIKE NO OTHER

WIDEX MAGNIFY™


最大音響利得 (入力音圧 50dB SPL)

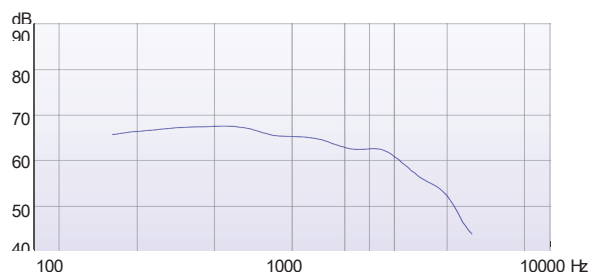

最大出力音圧 (入力音圧 90dB SPL)

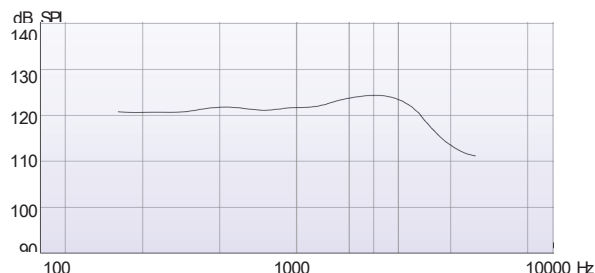

規準周波数特性 (入力音圧 60dB SPL)

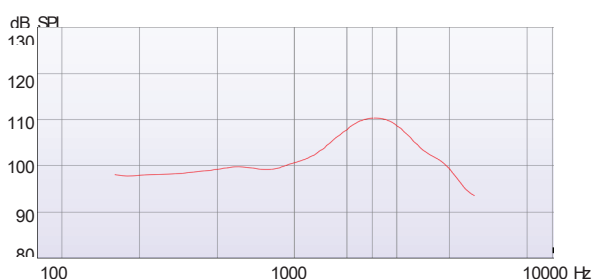JIS C 5512:2015 (2cm²カブラで測定) による公称値

		MRR2D-V2P	
電池の種類		リチウムイオン充電電池	
90dB入力最大出力音圧レベル	HFA	123	dB SPL
	ピーク	124	dB SPL
最大音響利得	HFA	63	dB
	ピーク	67	dB
規準利得	HFA	46	dB
周波数範囲		100-7550	Hz
等価入力雑音レベル		20	dB SPL
電池の電流		1.5	m A
全高調波ひずみ	500Hz	3	%
	800Hz	3	%
	1600Hz	3	%
試験用ループに対する等価感度		-	dB
誘導コイル入力の最大感度		-	dB

製造業者の名称: ワイデックス株式会社

105-0013 東京都港区浜松町2-6-2 浜松町262ビル6F

TEL: 0120-332-604