


補聴器メンテナンス装置

HA maintainer

TYN-01



HA maintainer TYN-01 は、減圧乾燥、Blow (ブロー)、Vacuum (吸引) 機能を用い、補聴器の品質保持のために補聴器から湿気、耳垢等の除去を行なう補聴器メンテナンス装置です。

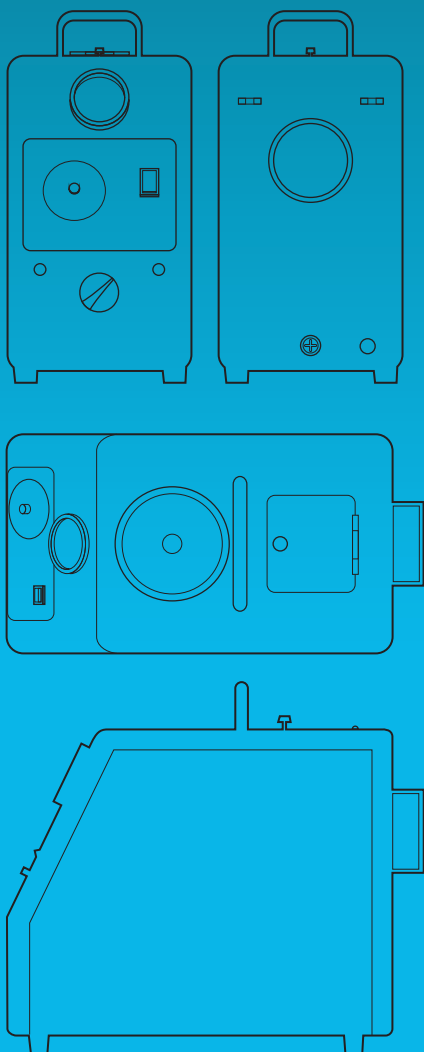

減圧乾燥チャンバー部外径拡大により両耳補聴器同時乾燥が可能。



ニードル、チャンバーカップ、ホースの収納装備付き。

静音設計 50dB A (△6dB A*)

*当社従来品 (Mark V) との比較。DRY 作動時、機器正面 1m 地点で騒音計を用い計測。

- ・コンパクトで洗練されたデザイン
- ・スピーディーな減圧 約 5 秒
- ・安全設計 (温度センサー内蔵)

仕様

- ・本体寸法 : 160×337×306mm (W×D×H)
- ・本体重量 : 約 6.6kg
- ・ポンプ : ピストン式シングルポンプヘッド
- ・定格時間 : 5分/回
- ・定格電圧 : AC100V 50Hz/60Hz
- ・定格消費電力
BLOW/VACUUM : MAX 85W(50Hz) / 105W(60Hz)
DRY : 70W(50Hz) / 90W(60Hz)
- ・真空圧力 : -79 ± 5 Kpa
- ・静音設計 : 50dB A
- ・ヒューズ : 2A / 125V
- ・筐体 : 金属製キャビネット
- ・製造国 : 日本

標準付属品

- ・黒色/黄色ホース : 各1本
- ・チャンバーカップ : 1個
- ・シリコン製チャンバーパッキン : 1枚
- ・ニードル : 6個 (※画像参照)
- ・シリンジ : 2個
- ・フィルター : 2個
- ・2P/3P 変換アダプター : 1個
- ・保証書
- ・取扱説明書

HA maintainer (標準付属品付き) : 165,000 円

交換用パーツ


各パーツは1個から
ご注文可能です。

チャンバーカップ




1個 **2,200 円**

フィルター

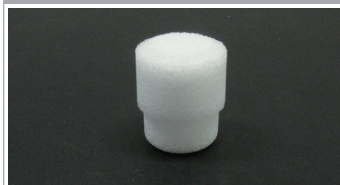

1個 **660 円**

シリコン製チャンバーパッキン

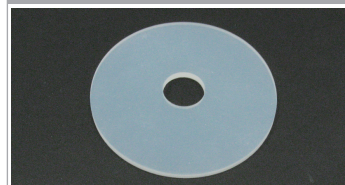

1枚 **4,400 円**

ニードル 6 種類

DPN-15G-2



DPN-18G-2



DPN-20G-2



DPN-21G-2



PPN-18G



CPN-18G-A45



DPN-15G-2

DPN-18G-2

DPN-20G-2

DPN-21G-2

PPN-18G

各1個 **1,100 円**

CPN-18G-A45

1個 **1,320 円**

本カタログに記載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税(10%)を含んでおります。

ワイデックス株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2 浜松町262ビル 6F

お問い合わせ先 :

ワイデックス株式会社ワイデックスサービスセンター

〒242-0007 神奈川県大和市中央林間7-10-1 三機大和ビルB館5階

TEL: 046-289-0235 FAX: 046-207-2919

202004